




S.O.S. Suínos

SUPORTE DE CONTENÇÃO DE LEITÕES

ESQUEMA DE MONTAGEM

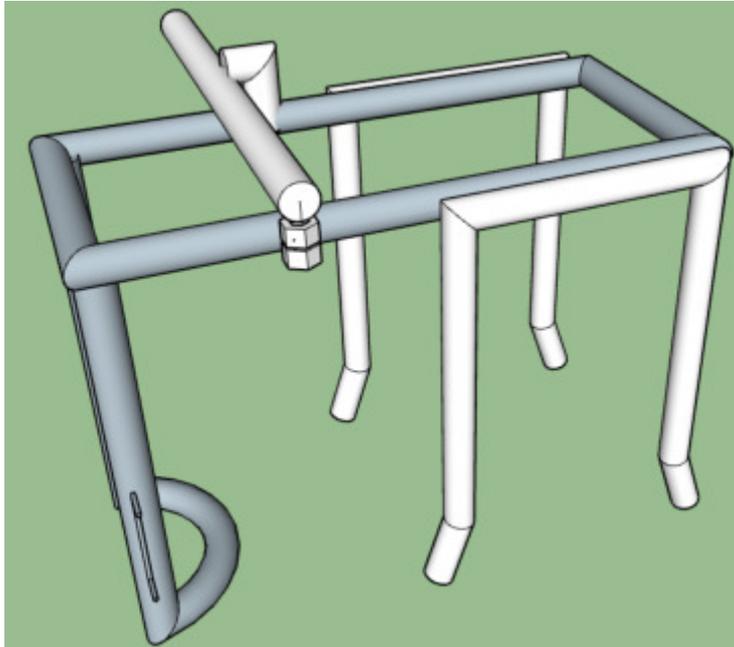

Material necessário para construir um suporte para imobilizar leitões para castrar e medicar.

3 metros de ferro liso redondo maciço 3/8
Para montar todas as peças, (estrutura) do suporte.

20 centímetros de ferro 1/4
Para fazer a fivela, para segurar o leitão com uma faixa de borracha ou couro.


1 porca 1/2 polegada,
1 Parafuso de 3/8
Que irão servir de dobradiça da barra móvel para prender o leitão.

1 cinta de borracha ou couro, de 6 centímetros por 25 de comprimento.

6 eletrodos 2,5 para as soldas de todas as peças.




Peça 01 – 2 Unidades

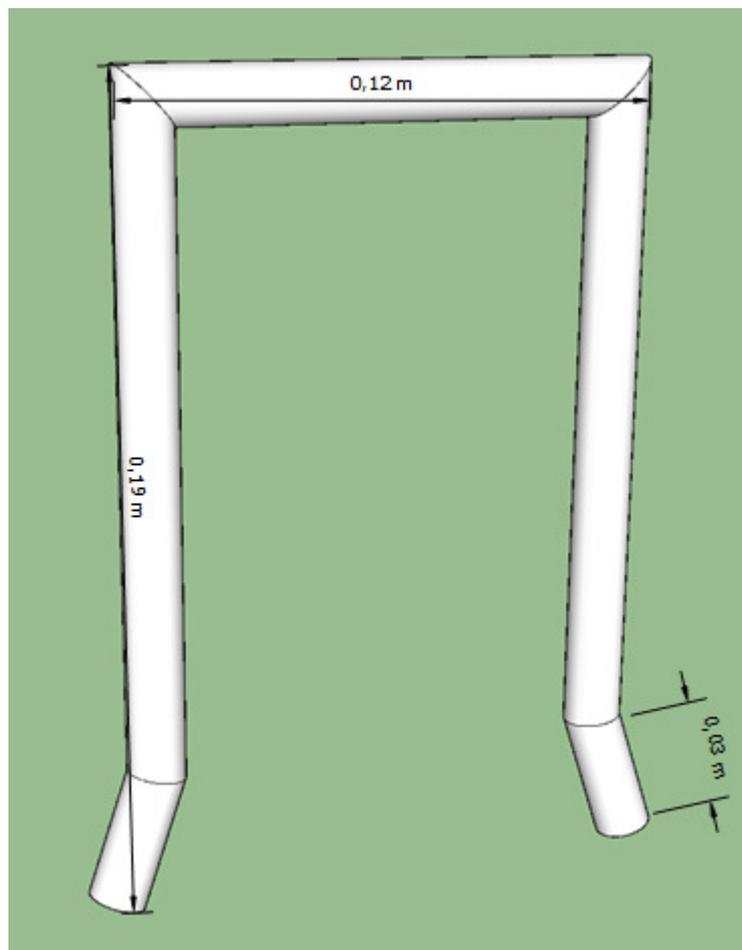





Peça 02 – 1 Unidade

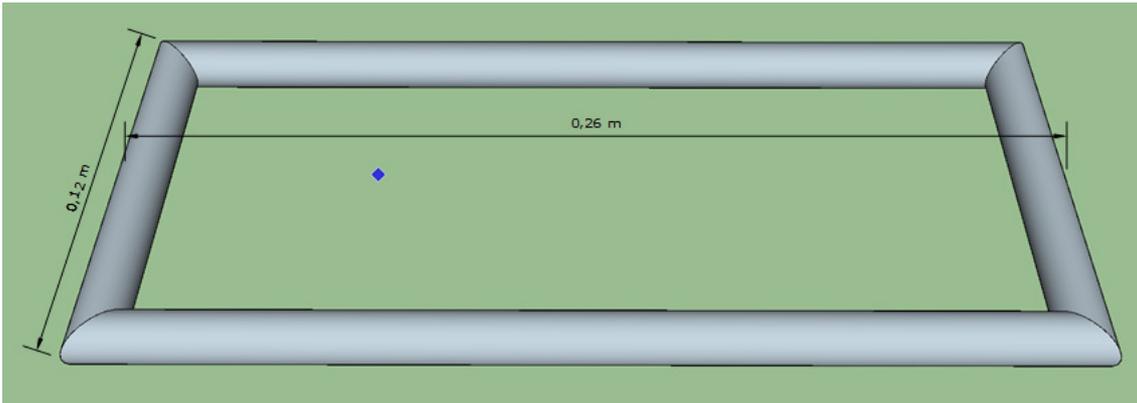

Peça 03 – 1 Unidade

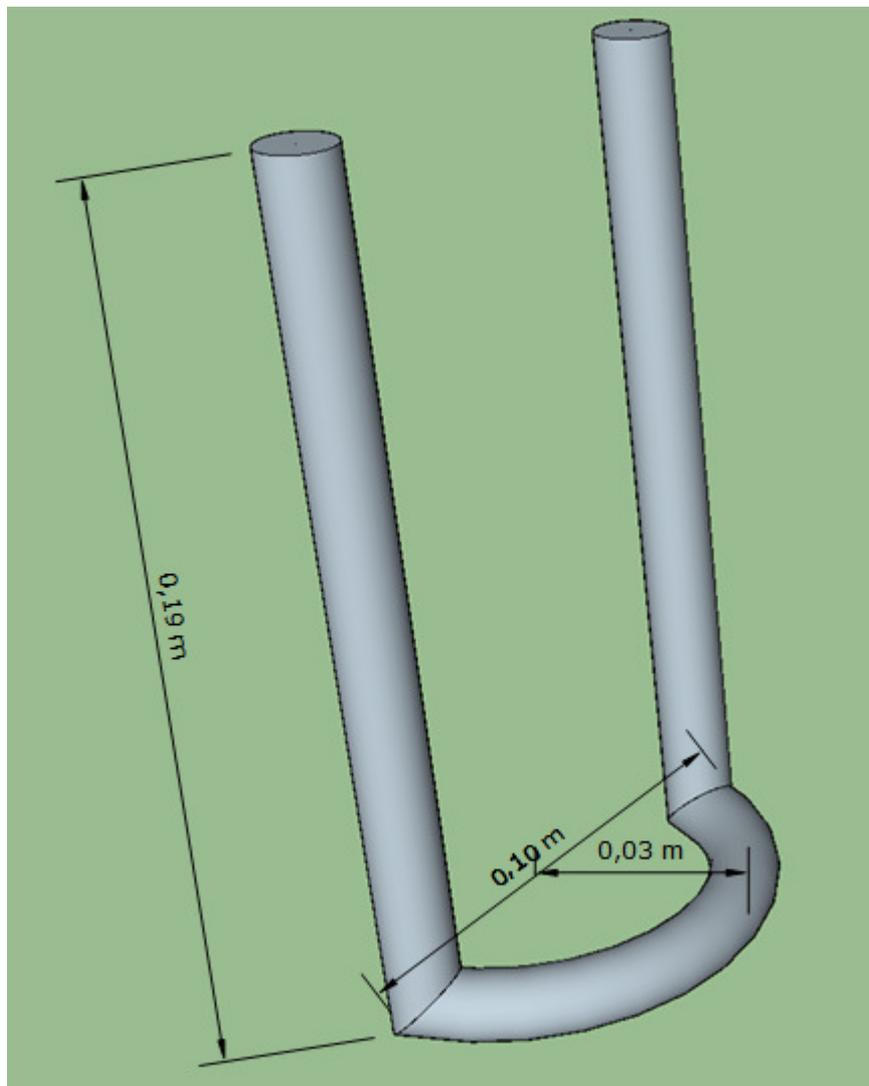

Peça 04 – Trava Basculante (Montagem logo a frente)

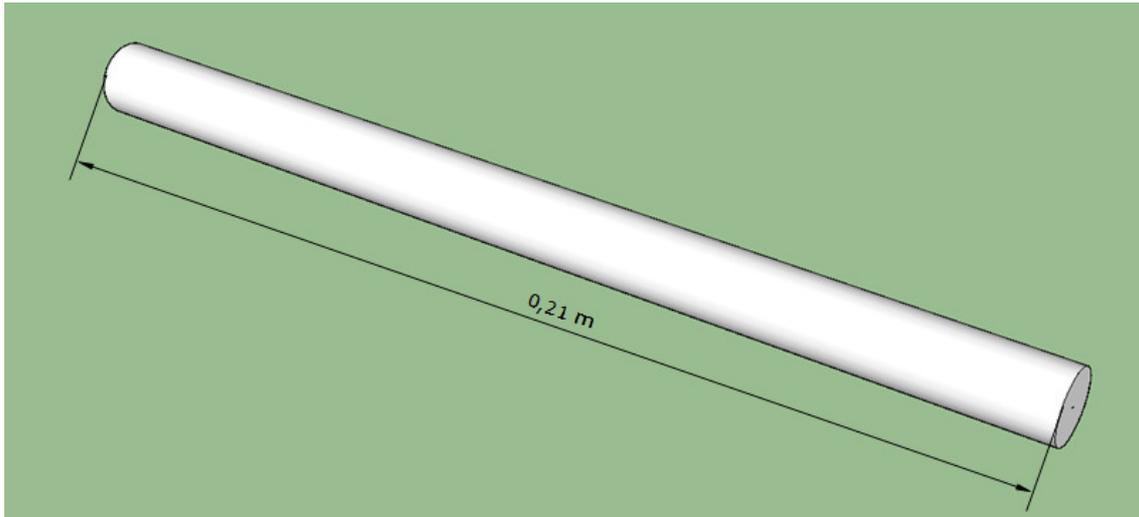



Montagem:

Peças 01

+

Peça 02



Montagem:

Peça 01

+


Peça 02

+

Peça 03




S.O.S. Suínos

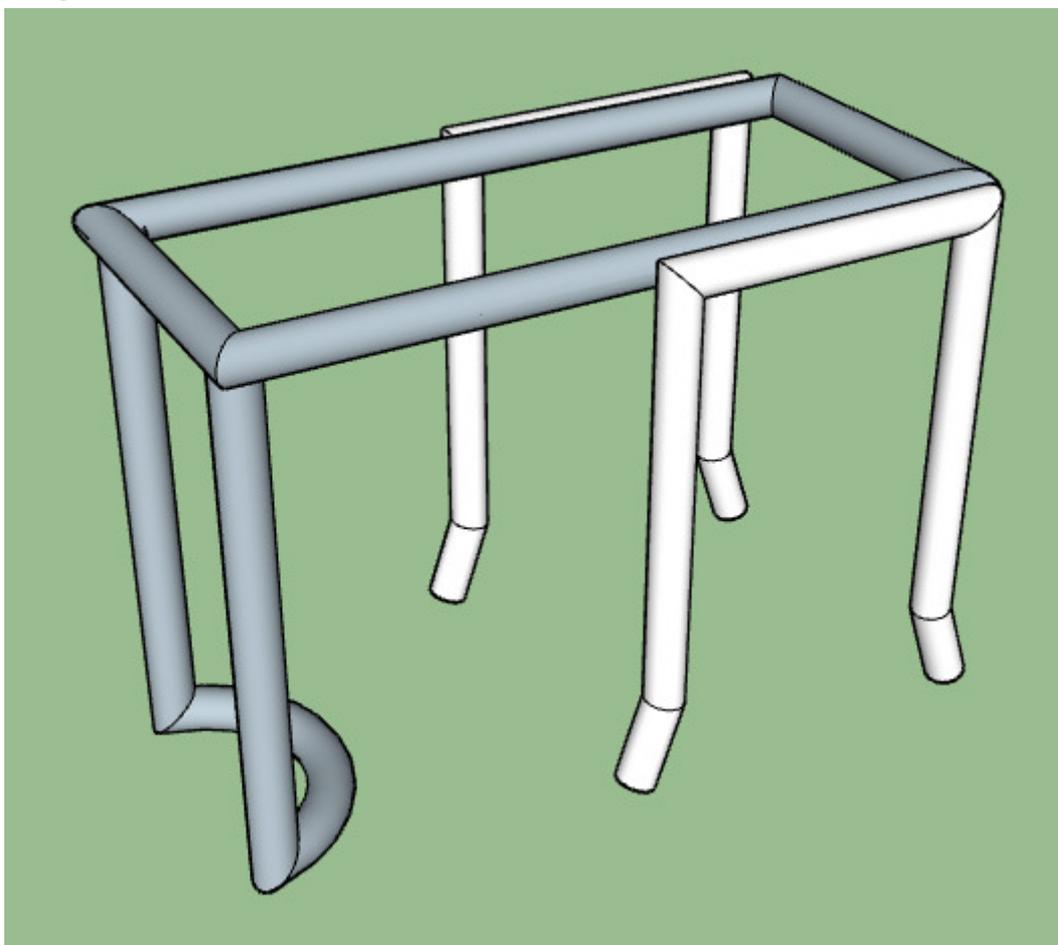




“Fivela” para Fixação da Correia ou Câmara de Ar
(Cinta para prender o leitão)

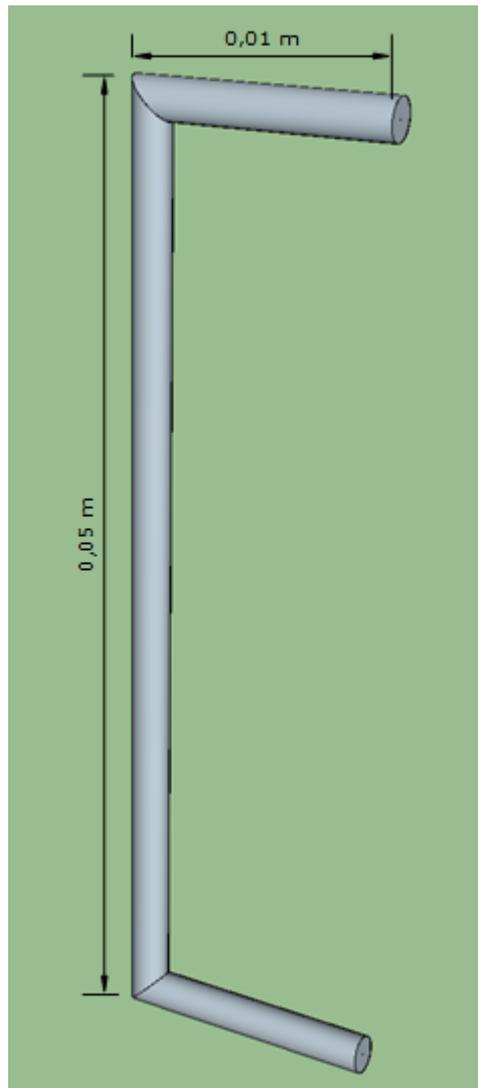




S.O.S. Suínos



Fixação “Fivela”

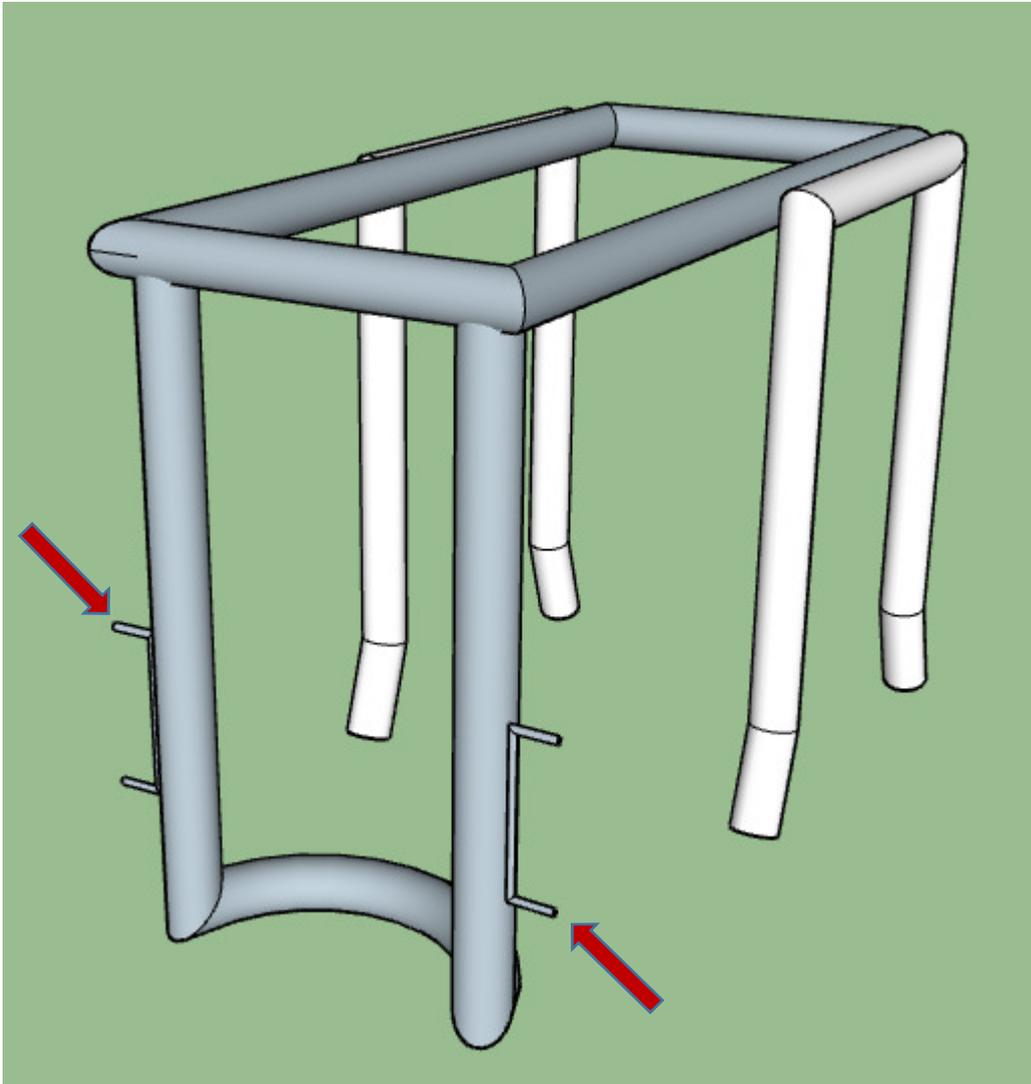


Fixação da Porca (Trava Basculante)

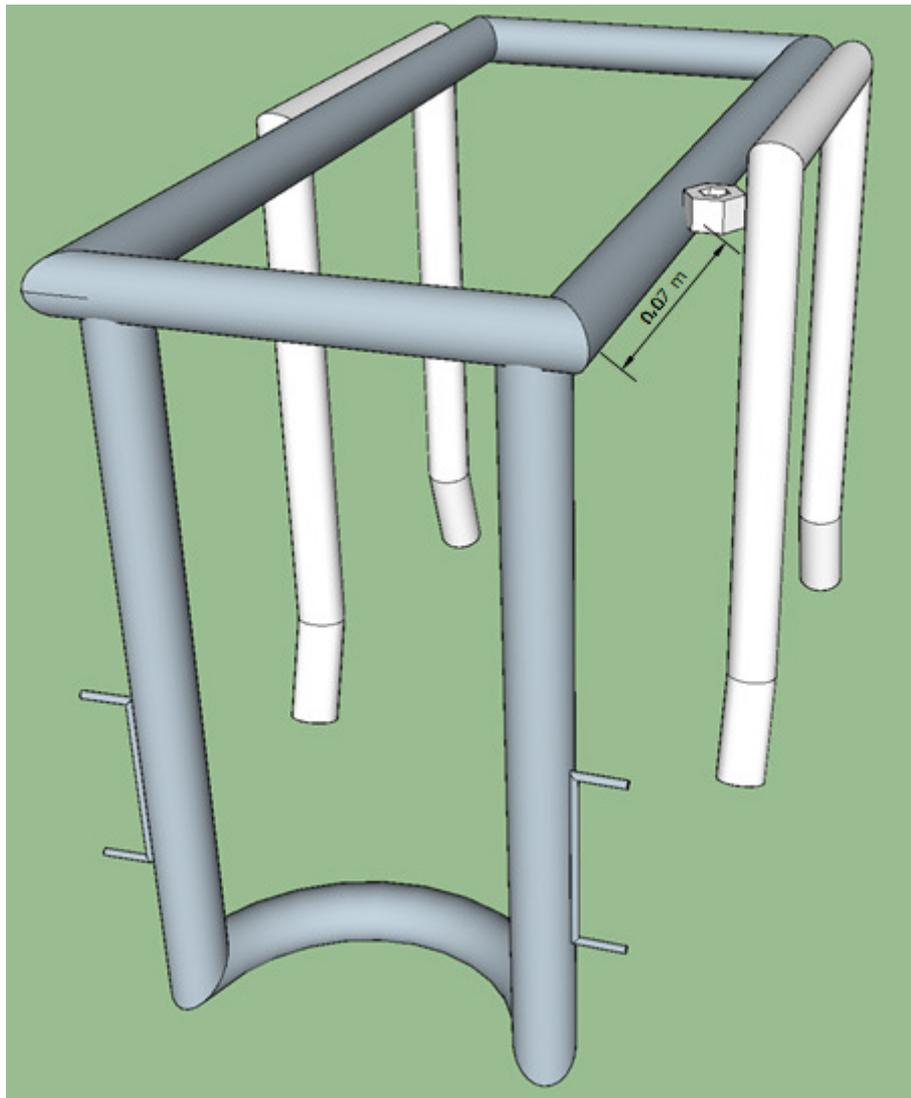

Montagem da Trava Basculante (Parafuso Dobradiça)

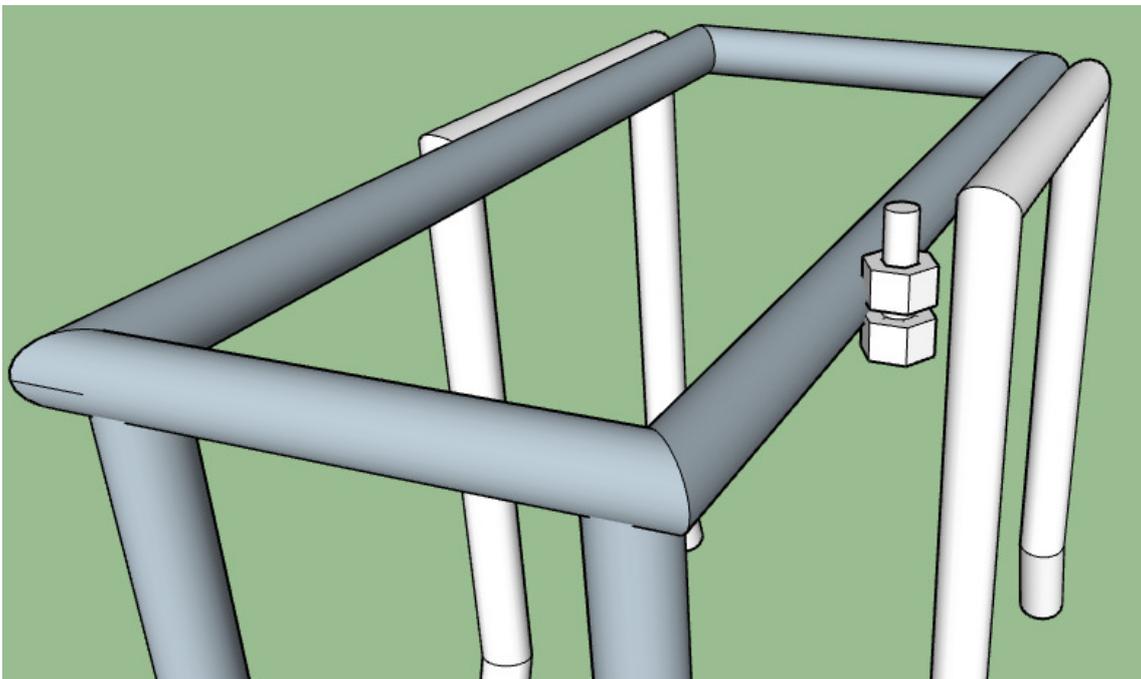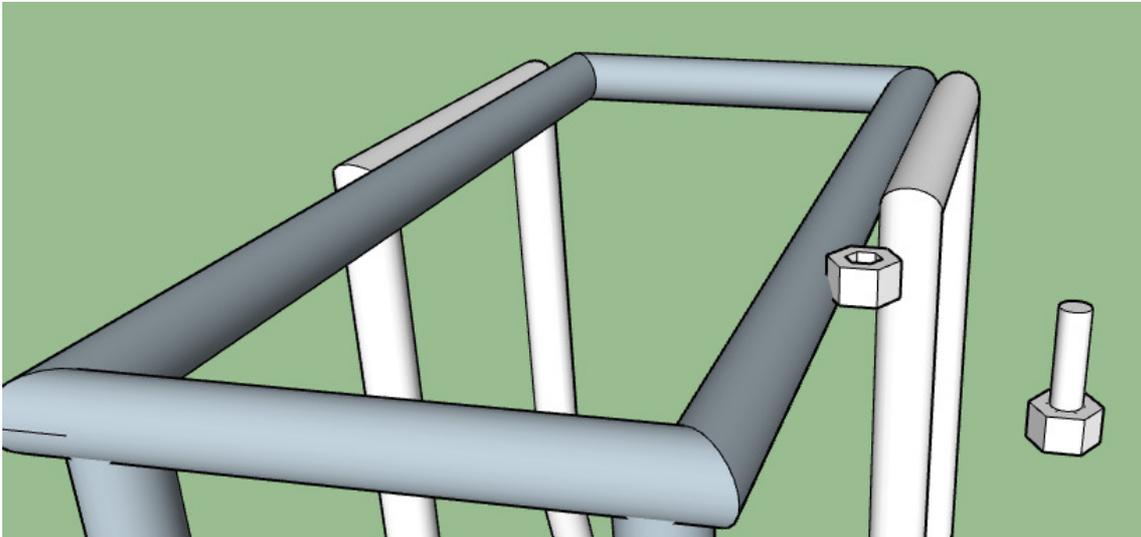

Solda Peça 4 no Parafuso

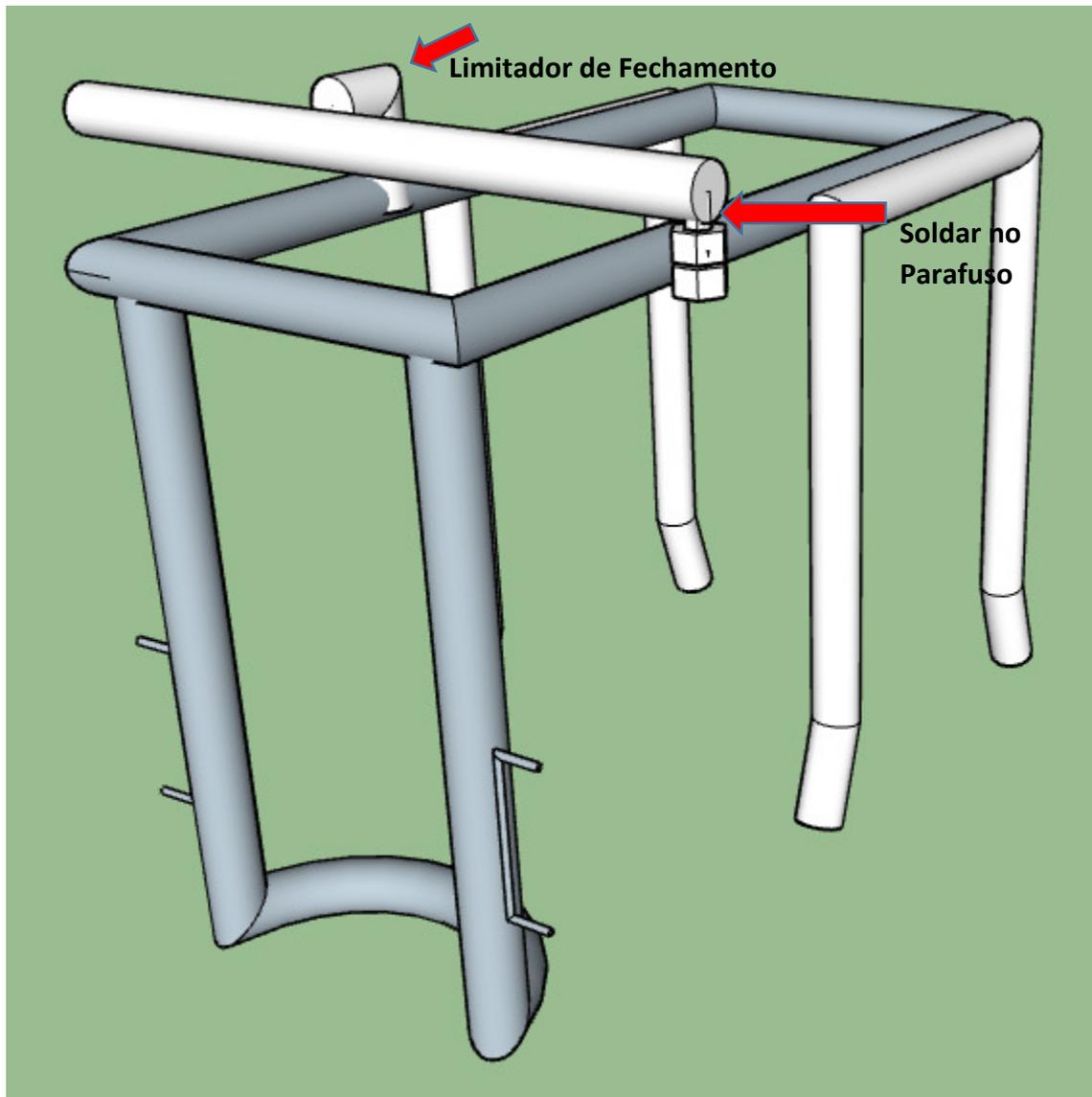



www.sossuinos.com.br

E-mail: sossuinos@uol.com.br

Fones: (62) 3268-30.16

9.9605-05.07

9.8112-77.77